

HILL 90C

Air Drop Tables



Forsco Labs
Exclusive Distributor - HILL Laboratories

WWW.FORSCOLABS.DE

AIR90C

Air-Drop Table

Reaktionsfreudig, sanft, schnell

Ausgestattet mit dem Hill Air-Drop * System, ermöglicht die Air90C die Wahl von einem bis vier Drops gleichzeitig auf dem seitlichen Bedienfeld. Die Kissen werden durch Betätigung einer der 2 Fußstangen aktiviert.



* Hill Air-Drop-System,
Funktionen pneumatisch gesteuert.

Vorgestelltes Modell:
Cinder Polster
Schwarze Basis

Fußleisten:
Die Drops werden mit dem Fuß aktiviert.

Wählen Sie einen bis vier Drops gleichzeitig auf dem Steuerpanel aus. Option eines zweiten Schaltkastens auf der gegenüberliegenden Seite.

STANDARDFUNKTIONEN

- Kopfstütze neigbar, Neigung 30 ° positiv und negativ
- Doppel Air Drop Kopfstütze
- Thorax-, Lendenwirbel- und Becken Air-Drops
- abnehmbare Thoraxteil (breakaway)
- Armlehnen und Kopfstütze offen auf 33 cm (Papierwickler und Schneider)
- Doppelte Wippedale und 2 Fußleisten
- Klappfußstütze
- Höhe von 55 bis 80 cm (Höhere Starthöhe verfügbar)
- Breite 60 cm, Länge 193 cm
- Auswahl von 20 Farben für Polster
- Beige, graue oder schwarze Acryl Thermo-Kunststoff-Basis
- 1 Jahr Garantie auf Teile und Werkstattreparaturen



AIR90C

AIR-DROP TABLE




▶ DROPS PNEUMATISCH GESTEUERT

Standardmäßig ist die AIR-90C Liege ausgestattet mit:


- Air Doppeltes Zervikal Drop der Kopfstütze
- Air Drop Thorax
- Air Drop Lendenwirbel
- Air Drop Becken,
- Thorax«Breakaway» : der pneumatische Zylinder unterstützt die Thoraxkissenöffnung zum zusätzlichen Komfort für schwangere Frauen, ...

▼ STANDARD-DROPS DER AIR-90C


Drop Thoracic

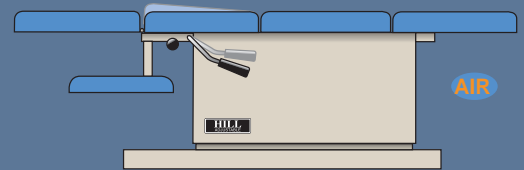


Drop Becken

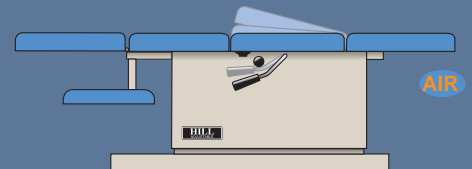

Drop Lendenwirbel

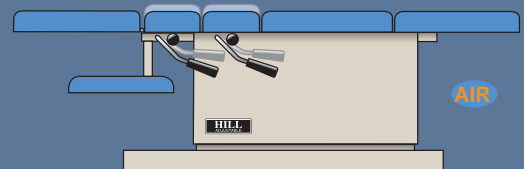

Thorax / Abdominal trennbar (Breakaway)

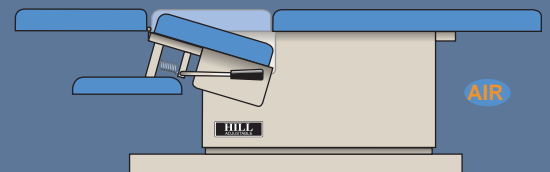

▶ KOPFSTÜTZE STANDARD

Kippen



Straight-Down / Drop-Forward
(beide im Dual-Drop Kopfteil)




▶ KOPFSTÜTZE OPTIONEN

Hebend



Flexion

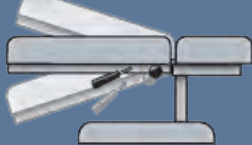


Axial



▶ FLEXION UND CBP OPTIONEN

Seitlich

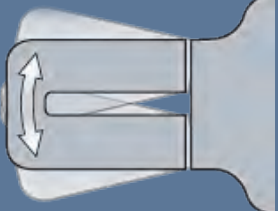

Schiebung / CBP



▼ FLEXION KOPFSTÜTZE



Die Kopfstütze Flexion wird mit den Kippen, Okzipitalgurt und abnehmbarem Kontrollstange geliefert. Die Kopfstütze ist entriegelbar (eine Gasfeder komprimiert sich sanft und bewegt sich rückwärts, sodass Sie die Flexion lateral und axial steuern können).

*Drops werden durch Drücken einer der beiden Fußstangen auf beiden Seiten des Tisches aktiviert.

Andere zusätzliche Optionen auf www.forscolabs.de

HILL AIR90C

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: 7 Ampere. 220 Hz - 50 Hz
- Hebekapazität: 204 kg
- Standardbreite: 60 cm (Option 68,5, 76 cm)
- Standardlänge: 185 cm (Fußteil gefaltet 162 cm)
- Schiebbar Knöchelstütze : Abgenommen 155 cm,
- Eingezogen 162 cm, Ausgezogen 193 cm.
- Standardhöhe: von 55 bis 80 cm
(Elektrische Einstellung der Höhe : 15s)
- Ein Jahr Garantie auf Teile und Werkstattreparaturen
- Polsterung Farbe: 20 Farben
- Thermoplastische Farbe der Basis feuerfest, Anti-bakteriell
- Höhe der Liege: 55 bis 80 cm
- Dicke: 6,5 cm
- Polsterungsdichte : Mittel,(auf Anfrage: weich oder hart)
- Versandgewicht: von 113 bis 136 kg.


POLSTERFARBEN



FARBEN DER BASIS



OPTIONAL POLSTER FINESSE®

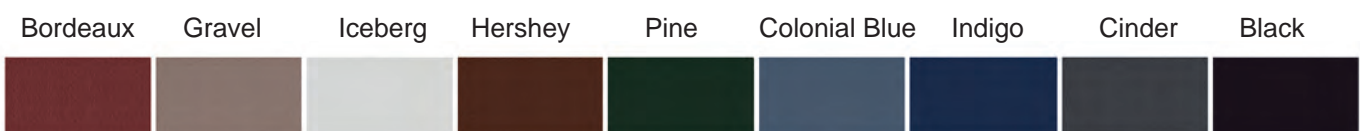

Die Boltaflex® Beschichtung mit Prefix™, ist wissenschaftlich entwickelt worden und gibt einen ausgezeichneten Schutz gegen Flecken und Kratzer. Sie ist garantiert gegen Platzen.

Farbtöne wie oben abgebildet können von den realen Farben abweichen.

Besuchen Sie WWW.FORSCOLABS.DE, um Ihre Air-Flex-Liege zusammenzustellen und Ihr Online - Angebot zu erstellen.

Treten Sie in Kontakt mit einem unserer Mitarbeiter, der gerne alle Ihre Fragen beantworten wird.

ForscoLabs
Exclusive Distributor - HILL Laboratories

149 avenue du Maine 75014 Paris, France
Tel: +33 183 597 160 - Fax:+33 972 447 924
contact@Forscolabs.de - www.Forscolabs.de